

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ TẦM SOÁT PHÂN CHO UNG THƯ RUỘT KẾT

***** **QUAN TRỌNG** *****


MẪU NGHIỆM CẦN ĐƯỢC GỬI ĐI CÙNG NGÀY LẤY.

Xin **ĐỪNG** dán Tem Forever; **BƯU ĐIỆN** sẽ không nhận và sẽ gửi trả lại

1. Xin đem cái lọ thu thập mẫu phân và mẫu đơn Phòng Thí Nghiệm UCSF ra. **Ghi ngày** bạn lấy phân trên lọ và vào mẫu đơn Phòng Thí Nghiệm UCSF ngay trước khi đi đại tiện (**được đánh dấu màu hồng**).



2. Hãy kẹp mảnh giấy nhận mẫu phân màu trắng giữa cái bàn cầu và cái vành trên của bồn cầu tiêu.

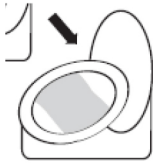

3. Đi cầu lên mặt trên của mảnh giấy nhận mẫu phân.
4. Hãy vặn và kéo cây que dò để mở cái nắp màu lục ra.




5. Hãy sử dụng cây que dò lấy mẫu nghiệm để quét trên mặt mẫu phân. Quẹt đầy mẫu phân vào xung quanh phần có đường rãnh của que dò lấy mẫu nghiệm này.



6. Đóng cái lọ đựng mẫu nghiệm lại bằng cách đút cây que dò mẫu nghiệm vào và đóng cái nắp màu lục đến tách một cái thật chặt.

XIN ĐỪNG MỜ RA LẠI

7. Hãy bỏ mảnh giấy lấy mẫu nghiệm vào cầu tiêu và dội cầu cho nó đi. Mảnh giấy lấy mẫu nghiệm có khả năng thoái hoá sinh học và sẽ không có hại cho hệ thống đường cống.
8. Hãy lấy túi nhựa và miếng lót có khả năng thấm hút nước từ trong phong bì ra.
9. Hãy bọc lọ mẫu nghiệm lại bằng miếng lót có khả năng thấm hút nước và bỏ vào trong túi nhựa.
10. Hãy bỏ túi nhựa và mẫu đơn Phòng Thí Nghiệm UCSF màu vàng cùng với lọ mẫu nghiệm và miếng lót có khả năng thấm hút nước vào phong bì.

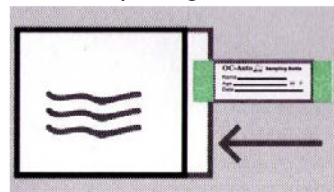

11. Hãy bóc bỏ miếng băng khỏi nắp phong bì. Gấp nắp phong bì lại theo đường gấp sẵn. Ấn mạnh xuống để dán kín phong bì.
12. Xin đừng quên ghi địa chỉ người gửi trên phong bì và dán 5 con tem firstclass lên phong bì. (**XIN ĐỪNG** dán Tem Forever; Bưu điện sẽ không nhận và sẽ gửi trả lại)

***** **QUAN TRỌNG** *****

MẪU NGHIỆM CẦN ĐƯỢC GỬI TRẢ LẠI CÙNG NGÀY LẤY PHÂN.

Mọi thắc mắc, xin gọi điện đến phòng mạch bác sĩ.